

**Производитель:** Shenzhen Naipo Technology Co. Ltd, No.102, Building P09, Huanan Town, Pinghu, Longgangqu, Shenzhen, Guangdong, China (Китай)

**Поставщик:** ООО «ФорEVER-Мобил» г.Минск ул. Кульман 9 пом.17  
гарантия 12 месяцев с момента покупки.  
Срок службы 24 месяца.


**Сервисный центр:** ООО «Портатив Мобайл Сервис» г.Минск Кульман9,  
Торговый центр «Монетка», сектор 5, место 10  
8 029 366-33-22 (Velcom),  
8 033 366-33-22 (МТС)  
Понедельник - выходной.  
Все остальные дни с 10 00 до 19 00 без обедов.

Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.  
**Web:** www.naipocare.com  
**E-mail:** support@naipocare.com  
**Add:** Huanan City Electronic Trading Building P05 Room 116, Longgang District, Shenzhen, China

CE FC RoHS   Made in China

# Naipo

## Массажер для стоп Шиаци с подогревом и воздушным давлением Naipo MGF-F15

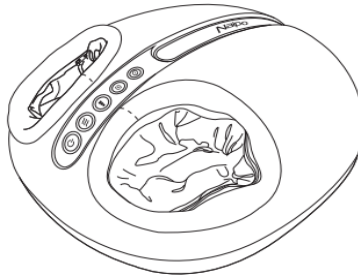

Model:MGF-F15

### Технические характеристики:

Материал корпуса: пластик  
Материал подкладки: текстиль  
Съемная крышка: для чистки подкладки и стелек  
Вид массажа: Шиаци (роликовый) и воздушно-компрессионный  
Область массажа: стопы, пальцы ног, пятки  
3 режима массажа  
3 степени интенсивности  
Инфракрасный подогрев  
Управление: 5 механических кнопок  
Максимальный размер ноги: 45 (EU 44)  
Размеры: 430 x 350 x 290 мм  
Вес: 4000 г  
В комплекте:  
Зарядное устройство

### ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

- Не допускайте попадания посторонних предметов в промежуток между массажной головкой и телом.
- Не допускайте контакта изделия с водой во избежание короткого замыкания.
- Если шнур питания или вилка повреждены, не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать его. Обратитесь в Сервисный центр. Убедитесь, что сетевое питание подходит для данного изделия.
- Пожалуйста, отключите устройство от источника питания после использования или перед чисткой во избежание повреждения оборудования или получения травмы.
- Используйте данное изделие в соответствии с настоящим руководством.
- Не используйте массажер, если вы находитесь под воздействием алкогольного опьянения или плохо себя чувствуете.
- Не используйте массажер в течение одного часа после еды.
- Не используйте массажер сразу после внезапного изменения температуры окружающей среды.
- Не используйте массажер в местах, где имеется большое количество пыли или агрессивных газов.
- Не используйте массажер, если он покрыт одеялом или подушкой.
- Пожалуйста, не засыпайте во время использования массажера.
- Не используйте массажер для домашних животных.

- 01 -

### Меры предосторожности:

Серьезные сердечно-сосудистые заболевания и повышенное артериальное давление.  
Онкологические заболевания.  
Травмы позвоночника и остеопороз.  
Кожные заболевания (экзема, псориаз) - не следует массировать в пораженной области.  
Варикозное расширение вен.  
Обострение хронических заболеваний и наличие воспалительных процессов в организме.  
Период беременности.  
Люди с высокой температурой.



### Руководство по эксплуатации и примечание:

Привыкайте к массажу постепенно. Для начала достаточно одного сеанса в день по 10-15 минут. Если ваша проблема – переутомление и легкие боли, рекомендуем этим и ограничиться.

- Не засыпайте во время использования устройства.
- Не используйте массажер более 30 минут.
- Не используйте массажер в течение одного часа до или после еды.
- Если устройство находится в холодном состоянии в теплом помещении, собранная влажность может повлиять на нормальную работу устройства и даже вызвать отказ включения. Поэтому рекомендуем после перемещения поместить продукт в комнату нормальной температурой в течение одного часа, а затем использовать.

- 02 -

### Управление – 5 механических кнопок.

**Кнопка установки таймера** – 10 минут (синий цвет индикатора), 15 минут (красный цвет) или 20 минут (синий и красный цвет).  
**Кнопка выбора режима массажа:** режим 1 – массаж роликами, режим 2 – массаж роликами и воздушной подушкой, режим 3 – массаж воздушной подушкой. По умолчанию установлен режим 1 (синий цвет индикатора). Нажмите еще раз, чтобы выбрать режим 2 (красный цвет) или режим 3 (синий и красный цвет).  
**Кнопка выбора интенсивности массажа:** медленный, средний или быстрый. По умолчанию установлен медленный режим (синий цвет индикатора). Нажмите еще раз, чтобы выбрать средний (зеленый цвет) или быстрый (красный цвет).  
**Кнопка включения инфракрасного подогрева.** Он дополнительно расслабляет мышцы, сухожилия, связки и усиливает эффект от массажа.  
По умолчанию подогрев включен (красный индикатор). Нажмите еще раз, чтобы отключить подогрев (индикатор погаснет).  
**Кнопка питания:** После использования, использования, выключите массажер и выньте вилку электропитания из розетки.

### Обслуживание:

- а) для хранения
- Если вы не используете устройство, поместите его в безопасное сухое, проветриваемое, прохладное место.
  - не перекручивайте провода.
  - не используйте проволочные висячие изделия.
  - Не храните массажер в солнечном месте и не используйте его при высоких температурах.

### Очистка массажера:

- Перед очисткой массажера отключите устройства от электросети.
- Используйте сухую ткань для чистки поверхности изделия, не используйте абразивные чистящие средства.
- Например, бензол или растворитель для очистки устройства.

### Обслуживание:

- Храните устройство в чистоте и вдали от мест с высокой влажностью.
  - Если вы не используете устройство в течение длительного времени, используйте пылезащитный чехол для покрытия продукта (приобретайте его самостоятельно).
  - Не допускайте попадания пыли.
- Этот продукт имеет устройство защиты от температуры, когда оно превышает безопасную температуру, оно перестанет работать автоматически; отключите питание, после его естественного охлаждения, а затем используйте устройство в обычном режиме.

- 03 -