

Производитель: Shenzhen Naipo Technology Co. Ltd,
No.102, Building P09, Huanan Town, Pinghu, Longgangqu,
Shenzhen, Guangdong, China (Китай)

Поставщик : ООО «Форевер-Мобил» г.Минск ул.
Кульман 9 пом.17
гарантия 12 месяцев с момента покупки.
Срок службы 24 месяца.

Сервисный центр: ООО «Портатив Мобайл Сервис»
г.Минск Кульман9,
Торговый центр «Монетка», сектор 5, место 10
8 029 366-33-22 (Velcom),
8 033 366-33-22 (МТС)
Понедельник - выходной.
Все остальные дни с 10 00 до 19 00 без обедов.


EAC - Устройство соответствует требованиям техническому
регламенту-Таможенного Союза

Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.
Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Add: Huanan City Electronic Trading Building P05
Room 116, Longgang District, Shenzhen, China

CE FC RoHS   Made in China

Naipo

Массажная подушка (массажер) универсальная Шиаци с подогревом Naipo MGP-129A

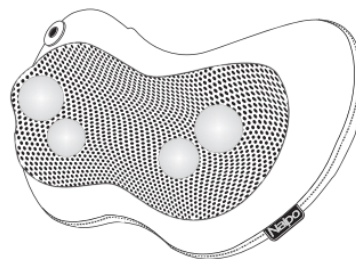

Инструкция по безопасности

При использовании массажера всегда соблюдайте все инструкции и основные меры предосторожности, включая следующие:

Чтобы снизить риск поражения электрическим током:

Всегда отключайте устройство от электрической сети сразу после использования и перед очисткой

Предупреждение:

Для снижения риска ожогов, пожара, поражения электрическим током или травм для людей:


- 1) При подключении устройства нельзя оставлять без присмотра. Отключайте его от розетки, когда он не используется, и перед установкой или снятием деталей.
- 2) Не используйте массажер под одеялом или подушкой. Чрезмерное нагревание может вызвать пожар, поражение электрическим током или привести к травме человека.
- 3) Не носите устройство с помощью шнура питания.
- 4) Никогда не эксплуатируйте изделие с заблокированными воздушными отверстиями. Держите воздушные отверстия свободными от ворса, волос и тому подобного.
- 5) Не бросайте и не вставляйте какой-либо предмет в любое отверстие.
- 6) Не используйте на открытом воздухе.
- 7) Не используйте, где используются аэрозольные (распыляемые) продукты или где вводится кислород.
- 8) Для отсоединения отключите все органы управления и выньте вилку из розетки.
- 9) При использовании данного устройства вблизи детей, инвалидов, необходимо пристальное наблюдение, чтобы убедиться, что они не злоупотребляют продуктом.
- 10) Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
Не используйте массажер в чрезмерно чувствительных участках кожи или при плохой циркуляции.
- 11) Устройство имеет нагретую поверхность. Лица, нечувствительные к теплу, должны быть осторожны при использовании прибора.
- 12) Устройство должно поставляться только при безопасном сверхнизком напряжении, соответствующем маркировке на приборе.
- 13) Прибор следует использовать только с блоком питания, поставляемым в комплекте.

1

Варианты массажа:



Техническое описание работы массажера:

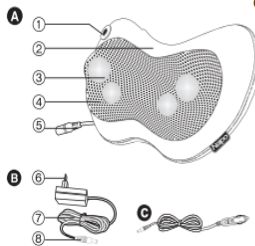

Как это работает:

1. Вставьте вилку сетевого шнура или автомобильный адаптер.
 2. Нажмите один раз кнопку включения. Внутри – 4 массажных 3D-ролика. Они вращаются во всех направлениях, имитируя реальные движения рук массажиста также проводя тепловую терапию в течение 20 минут.
 3. Нажмите снова кнопку включения. На этот раз массажер прекратит свою тепловую терапию, но массаж продолжится без тепловой терапии.
 4. Нажмите выключатель питания и продолжайте нажимать в течение 3 секунд, чтобы остановить все функции и прекратить сеанс массажа.
- После использования: Когда массажер не используется, его следует отключить.

Для очистки и обслуживания продукта:

1. Очистка
Перед чистой убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Вилка питания должна быть отключена из гнезда розетки. Для чистки продукта используйте сухую ткань.
2. Техническое обслуживание:
Держите продукт в чистоте и далеко от влажной среды.
Внимание:
Пожалуйста, убедитесь, что для чистки продукта не используется, бензин, растворитель или другие агрессивные моющие средства.

Меры предосторожности:

- Чтобы массаж принес только пользу, не используйте массажер при наличии противопоказаний.
Серьезные сердечно-сосудистые заболевания и повышенное артериальное давление.
Онкологические заболевания.
Травмы позвоночника и остеопороз.
Кожные заболевания (экзема, псориаз) - не следует массировать в пораженной области.
Варикозное расширение вен.
Обострение хронических заболеваний и наличие воспалительных процессов в организме.
Период беременности.

Технические характеристики:

- Форм-фактор: подушка
Материал чехла: искусственная кожа, дышащая сетка
Основное назначение: массаж шеи
Дополнительные возможности: массаж верхней части спины, поясницы, бедер, голеней
Вид массажа: разминающий Шиаци
4 вращающихся 3D-ролика
Инфракрасный подогрев: до 40°
Элементы управления: 1 кнопка
Ремень для крепления на подголовник
Размеры: 325 x 200 x 100 мм
Вес: 1600 г
В комплекте:
Сетевое зарядное устройство
Автомобильное зарядное устройство

2

3